

Labortiefkühlschrank ProfiLine Pegasus PLPE

- Stille Kühlung und manuelle Abtauung
- Mikroprozessorgesteuerter Temperaturregler mit Digitalanzeige und Passwort-Schutz
- Netzunabhängige Alarmeinrichtung, optisch/akustisch
- Über- und Untertemperaturalarm
- Alarm bei Netzausfall
- Alarm bei Fühlerfehler
- Türalarm
- Integrierter Datenlogger mit USB-Schnittstelle
- Potentialfreier Alarmkontakt zum Anschluss an ein Fernalarmsystem
- RS 485 - Schnittstelle
- Vorbereitung für GSM-Alarm
- Außengehäuse verzinkt und weiß beschichtetes Stahlblech
- Tür mit Schloss, Türanschlag rechts
- Isolierte Innentür vermindert Kälteverlust beim Öffnen
- Innenraum aus Edelstahl (CNS)
- Nutzraumdurchführung für externen Temperaturfühler
- Frontfüße höhenverstellbar, hinten zwei Rollen



ProfiLine Pegasus PLPE0686EWN


Siehe auch Thorbi® Primus TPU1286
-86 °C / 131 l
Seiten A1.5 - A1.8




Modell Profiline Pegasus	PLPE0686EWN
Temperaturbereich	°C: -40/-86
Inhalt	Liter brutto: 55
Außenmaße (BxTxH)	mm: 600x700x815
Innenmaße (BxTxH)	mm: 360x505x310
Fächer/Innentüren	: 1/1
Tiefe bei geöffneter Tür	mm: 1200
Gewicht	kg: 80
Netzanschluss	: 1/N/PE ~ 230 V 50-60 Hz
Versandmaße (BxTxH)	mm: 660x800x1000
Versandgewicht	kg: 100
Transportverpackung	: Holzkiste

ProfiLine Pegasus + Zubehör:	Außen / Innen	Art.-Nr.
ProfiLine Pegasus PLPE0686EWN	weiß / CNS	GSPLPE0686EWN
USB-Datenlogger bis -200 °C mit LCD-Display.		ZXX2-045-010
ProfiCaller Telefonwählgerät.		a. A.
Pt-100 Temperaturfühler, zusätzlich eingebaut für externe Temperaturlaufzeichnung.		ZXX2-020-2L
CO ₂ -Notkühlsystem, freistehend.		ZXX2-093
Anschlussvorbereitung CO ₂ -Notkühlsystem.		ZPLPE2-094


Ausstattungs-möglichkeiten

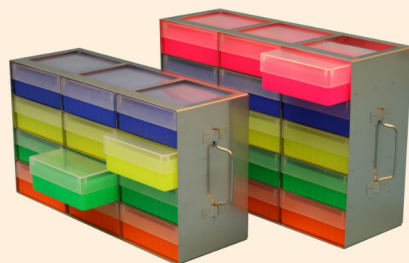


Edelstahl-Schrankgestelle

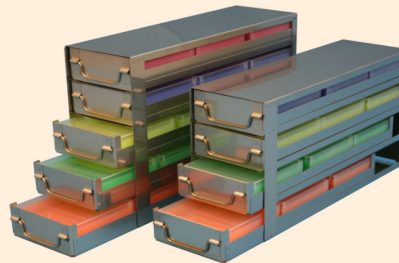

Edelstahl-Schrankeinschübe

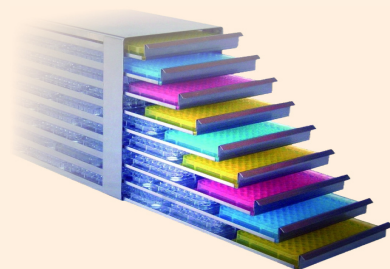

Mikrotiter Edelstahl-Schrankeinschübe

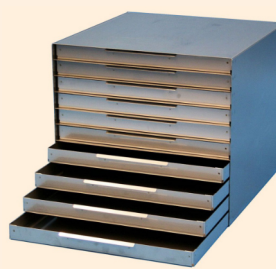

Edelstahl-Schrankeinsätze mit Schüben



Bitte fordern Sie Ihren persönlichen Einrichtungsvorschlag an.

Weitere Ordnungssystemvorschläge finden Sie in unserem separaten Katalog.



Laboratory Upright Freezer ProfiLine Pegasus PLPE

- Static cooling manual defrost
- Micro-processor driven temperature controller with digital display and password protection
 - Visual/audible alarm device, mains-independent
 - Alarm warning for excess and insufficient temperature
 - Power failure alarm
 - Probe failure alarm
 - Door alarm
 - Integrated data logger with USB port
- No-volt remote alarm contact for connection to an alarm system on the premises
- RS 485 port
- Prepared for GSM alarm
- External housing made of white, galvanized steel plate
- Lockable door, door hinges on right
- Insulated inner doors to minimize cold air loss
- Duct to storage compartment
- Front feet of cabinet allow for height adjustment, two castors at rear



ProfiLine Pegasus PLPE0686EWN


See also Thorbi® Primus TPU1286
-86 °C / 131 l
pages A1.5 - A1.8

Model ProfiLine Pegasus	PLPE0686EWN
Temperature range	°C: -40/-86
Content	Liter brutto: 55
Ext. dimensions (WxDxH)	mm: 600x700x815
Int. dimensions (WxDxH)	mm: 360x505x310
Compartments/inner doors	: 1/1
Depth with door opened	mm: 1200
Weight	kg: 80
Power supply	: 1/N/PE ~ 230 V 50-60 Hz
Shipping dimensions (WxDxH)	mm: 660x800x1000
Shipping weight	kg: 100
Transport packaging	: Wodden box




ProfiLine Pegasus + Accessories:	Outside / Inside	Cat. No.
ProfiLine Pegasus PLPE0686EWN	white / CNS	GSPLPE0686EWN
USB data logger to -200 °C with LCD display.		ZXX2-045-010
ProfiCaller telephone dialler.		on request
Pt-100 temperature sensor, additionally installed for external temperature recording.		ZXX2-020-2L
CO ₂ back-up system, free-standing.		ZXX2-093
Facilities for customer connection of CO ₂ back-up system.		ZPLPE2-094


Storage System Alternatives

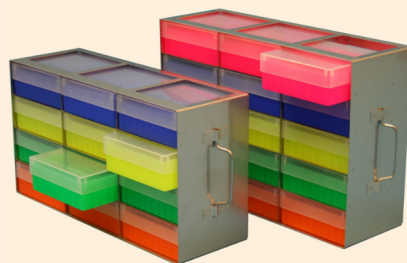

Stainless steel horizontal racks

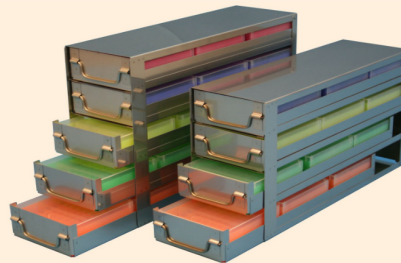


Stainless steel drawer racks

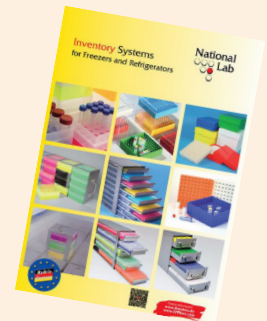


Please ask for a personal fitting option.

Recommendations for additional storage sets can be found in our separate catalogue.

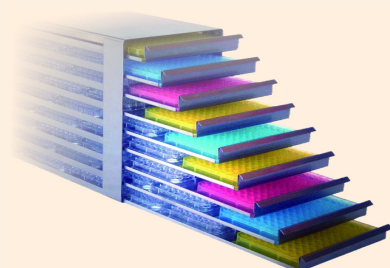

Microtiter stainless steel drawer racks

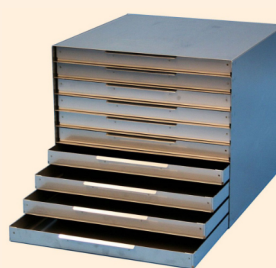

Stainless steel insert with drawers

